


DESCRIPTION:

Votre médecin vous a prescrit un test de CYTOLOGIE urinaire. Ce test sert à détecter les cellules anormales afin de détecter certains cancers (*reins, vessie ou des voies urinaires*). La CYTOLOGIE urinaire fait souvent suite à l'observation de globule rouge dans une l'analyse d'urine. Ce test consiste à faire entre une et trois collectes d'urines, dans cette trousse, elle contient tout ce dont vous avez besoin pour faire UNE seule collecte. Éviter la 1^{re} urine du matin.

VOUS AUREZ BESOIN:

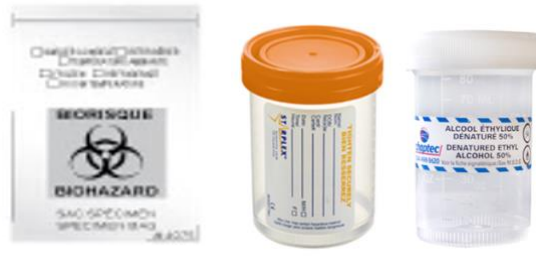

PRÉLÈVEMENT:

1. Ouvrir votre trousse (*sac BIOHAZARD + pot STÉRILE à jeter après usage + pot avec ALCOOL 50%*).
2. Inscrire LISIBLEMENT votre : NOM, Prénom / Date & Heure (*de la collecte*) sur le l'étiquette du pot contenant (avec l'alcool 50%) et si ce n'est pas déjà fait prenez un marqueur NOIR et tracer une 1^{re} LIGNE exactement où termine la quantité d'alcool 50% (*qui devrait être 30ml*) et tracer une 2^e LIGNE à 60ml. Ce pot devrait contenir une fois terminer, EXACTEMENT la MÊME quantité d'ALCOOL 50% et d'URINE.
3. Uriner un peu dans la toilette et arrêter, puis...
4. Uriner directement dans le POT STÉRILE jusqu'à la LIGNE de **50ml**, puis...
5. Déposer le contenant sur une surface stable, afin de pouvoir...
6. Terminer d'uriner dans la toilette afin de vider complètement la vessie, une fois terminée...
7. Dévisser et retirer le couvercle du pot (*avec alcool 50%*).
8. Transférer de l'urine contenue dans le pot STÉRILE jusqu'à la 2^e LIGNE NOIRE.

À SAVOIR: Le volume d'urine ajouté est **CONSIDÉRÉ** comme **ADÉQUAT**, lorsque le **NIVEAU** de **LIQUIDE** total (Alcool 50% + urine) ont atteint le double (*60ml*) de la quantité d'alcool 50% contenu au départ (*environ 30ml*).

9. Refermez le pot (*avec l'urine + alcool 50%*) hermétiquement, ensuite jeter le reste de l'urine dans les toilettes et jeter le couvercle et le pot (*STÉRILE*) dans les poubelles.
10. Replacer le pot (*avec l'urine + alcool 50%*) dans le sac BIOHAZARD et refermer celui-ci hermétiquement.
11. Lavez-vous les mains soigneusement.
12. Placer et conserver le sac (*contenant l'urine + alcool 50%*) au réfrigérateur (*4°C*).

ATTENTION: Vous devez apporter ou remettre votre échantillon d'urine dans les 30 minutes suivant la collecte et assurez-vous d'apporter ou d'avoir votre REQUÊTE et votre RAMQ (*Carte d'Assurance Maladie*), car le laboratoire peut REFUSER tous les prélèvements NON CONFORMES aux instructions énumérées ci-haut.

RÉSULTAT en laboratoire : Environ 24h après réception du spécimen, mais peut prendre jusqu'à 1 mois